

# Aka-Brief #12 Sert Malzemeler 700-2000 HV

1




Piatto 120




Su



300 rpm

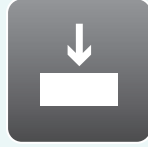

3.5 N Düzgünleşene kadar

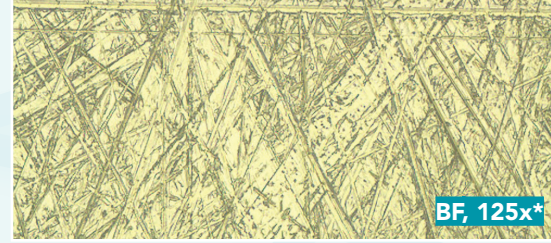

2




Alleggran 9




DiaMaxx  
Poly 9 µm



150 rpm

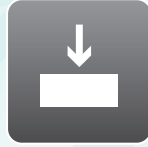

3.5 N 5 : 0 0 d a k

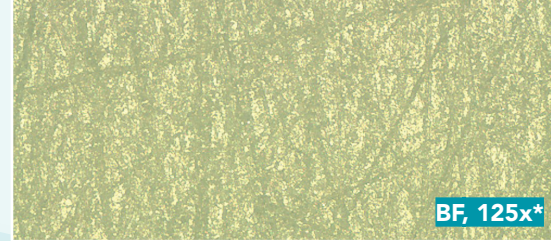

3




Daran



DiaMaxx  
Poly 3 µm



150 rpm

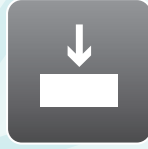

3.5 N 5 : 0 0 d a k



Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 arttırılmalıdır.

Daha geniş numuneler için baskı gücü arttırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.

\* Hazırlanan malzeme: Takım çeliği