



MULTIPOL EASY


Donanım:

- Ø 200, 250 veya 300 mm çaplarında alüminyum diskler adapte edilebilir.
- Özel kir tutmaz ve çizilmez toz boyalı çelik kasa
- Su akışını kolaylaştıran uzatılabilir musluk ile kolay temizlik sağlayan pürüzsüz küvet yüzeyi
- Güvenlik düzenlemelerine uygun ön konumlu acil stop düğmesi
- Ayarlanabilir ayak yükseklikleri ile düzgün seviyelendirme ve laboratuvarınızda kolay taşıma olanağı
- 4,3" renkli dokunmatik uluslararası kolayca anlaşılabilen ikonik kontrol paneli

Teknoloji:

- Dokunmatik ekran üzerinden bütün cihaz parametrelerinin dijital kontrol ve ayarı
- Çalışma diskinin dijital hız kontrolü ve regülasyonu (Çalışma diskisi 0 - 650 rpm)
- Saniye cinsinden zaman ayarlı veya devamlı çalışma özelliği.
- Newton cinsinden uygulanan baskının gösterimi ile manuel hazırlamada dahi tekrar üretilebilir mükemmel sonuçlar
- Geniş numuneleriniz için torklu çalışma
- Sık kullanılan zımparalama ve parlatma hız değerleri olan 150 ve 300 rpm için kısayol tuşları
- Çalışma diskisi için dijital dönüş yönü ayarı
- Dijital su açma-kapama kontrolü
- Özel ihtiyaçlara uyum için yazılım güncelleme olanağı
- Cihaz kalibrasyonu ve arıza tespit için servis ekranı



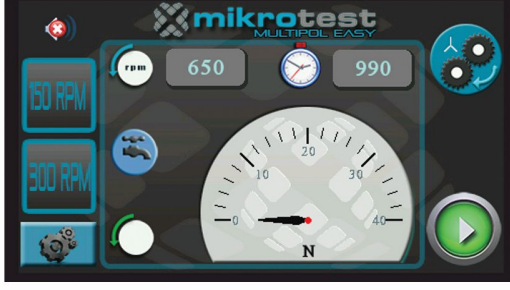

Sistem tamamen ikonik olarak tasarlanmış ve dokunmatik kontrol edilmektedir. Sistem bu özelliği ile uluslararası olarak kolayca anlaşılabilme ve kullanım rahatlığını sunmaktadır.

İkonik yapı zımparalama ve parlatma parametrelerin ayar ve kontrolü tek bir ekran üzerinden yapılabilmesine de imkan sağlamaktadır.

Zımparalama ve parlatma ayar ekranı:

- Dijital baskı göstergesi
- Çalışma diski hız ayarı
- Zamanlayıcı ayarı
- Servis ekranı kısayolu
- Su açma kapama
- Rotasyon yönü seçimi
- 150 ve 300 rpm için kısayol düğmeleri
- Başlatma durdurma düğmesi
- Torklu çalışma geçiş düğmesi
- İletişim ve cihaz bilgilerinin bulunduğu ekrana geçiş kısayolu



Şifre korumalı servis ekranında cihaz parametrelerinin kalibrasyonu ve cihaz fonksiyonlarının testleri gerçekleştirilir. Böylece hızlı tespit ve çözümler sunulabilmektedir.